

# TEL CARE®

Sistema de monitoreo de glucosa en la sangre Telcare

## Guía de referencia rápida



Antes de usar el medidor de glucosa por primera vez, cárguelo durante al menos 3 horas con el cargador de CA que se incluye en el kit. Siga las instrucciones para las pruebas de control de glucosa de la pagina 8 del Manual del usuario del sistema BGM.




Limpie y desinfecte el dispositivo de punción después de cada uso. Limpie y desinfecte el medidor al menos una vez por semana. CONSULTE LOS DETALLES EN EL MANUAL.

1



Lávese las manos y el sitio de prueba con agua tibia y jabón. Séquese bien las manos.

2

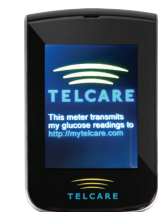


Encienda el medidor de glucosa con el botón correspondiente. Se pueden producir leves demoras mientras se enciende.

3




Cuando aparece la pantalla **Introducir tira reactiva** inserte la tira Telcare. Empuje la tira hacia adentro hasta que aparezca el mensaje **Aplicar sangre**.

5

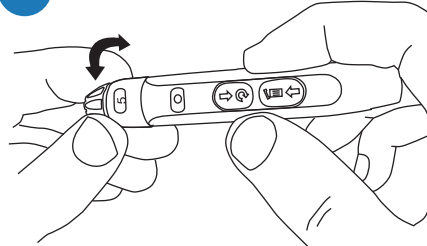

Ajuste el capuchón a la profundidad de punción deseada.

4

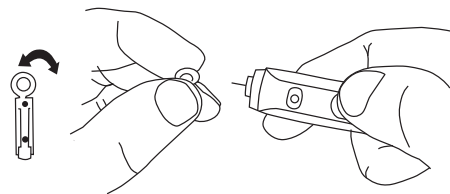


Inserte una lanceta nueva en el dispositivo de punción y gire la tapa plástica para desprenderla.

**IMPORTANTE:**


El dispositivo de punción es para el uso de un solo paciente.

6

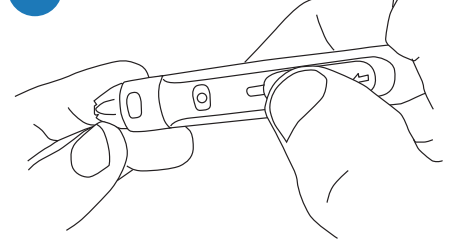

Con el pulgar, empuje el botón deslizante hacia atrás. Se escuchará un clic, lo que indica que portador de la lanceta está fijo en su posición.

7

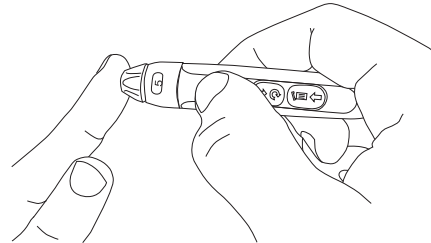


Apoye el extremo del dispositivo contra el lado del la yema del dedo. Presione el boto[with tilde]n de disparo para accionar la lanceta.

9



Se mostrará su resultado en la pantalla.

8

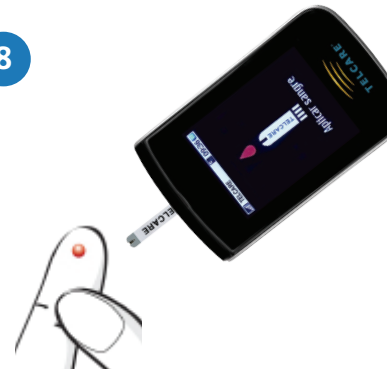

Asegúrese de que aparezca la pantalla **Aplicar sangre**. Acerque la punta de la tira de prueba a la gota de sangre y tóquela hasta que el extremo se llene.

10



Medio  
Abajo  
(Consulte la ubicación de los botones en la página 9 del Manual del usuario.)

Resalte la etiqueta de una lectura utilizando el botón de **abajo**. Ingrese la etiqueta de la lectura presionando el botón del **medio**.


11



Saque la tira de prueba del medidor y envíe los datos a MyTelcare.com. SI NO HAY CONEXIÓN DE DATOS:

1. Muévase a otro lugar para obtener señal celular.
2. Vaya a **Historial**.
3. Resalte la lectura no enviada.
4. Presione el botón lateral del medio.

12

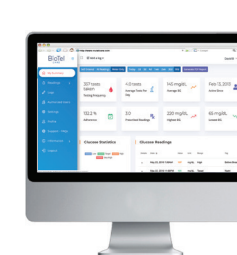

Conéctese a MyTelcare.com para:

- Ver las lecturas de glucosa en la sangre
- Invitar a cuidadores
- Definir las opciones de mensajes
- Crear zonas objetivo
- Imprimir datos


Consulte las instrucciones completas en los Manuales del usuario del Telcare BGM y Telserve que se encuentran en MyTelcare.com.

**Llame al 888-666-4530 (EE. UU.) o al (1) (978) 610-4688 (Internacional) (de 9 a.m. - a 9 p.m., horario estándar del Este, de L-V)**

si tiene alguna pregunta o comentario. Para uso in vitro únicamente.

**TEL CARE®**

Telcare, LLC  
150 Baker Avenue Extension  
Suite 300  
Concord, MA 01742, EE. UU.

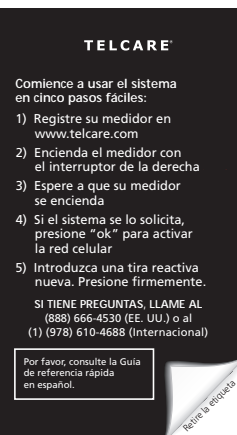

(Las imágenes son solo de referencia)  
ART – 065 Rev. 2

TEL CARE®

Blood Glucose Monitoring System

# Quick Reference Guide




Before first use, charge the glucose meter for at least 3 hours with the AC charger included in your kit. Follow control solution instructions on Page 8 of the BGM User Manual.



Clean and disinfect your lancing device after every use. Clean and disinfect your meter at least once a week. PLEASE REFER TO DETAILS IN THE MANUAL.

1

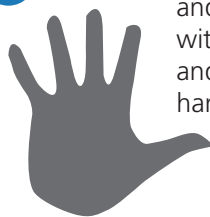

Wash your hands and testing site with warm water and soap. Dry your hands well

2




Turn on the glucose meter using the power button. Slight delays may occur when meter powers on.

3




When the **Insert Test Strip** screen appears, insert the Telcare test strip. Continue to push the strip in until **Apply Blood** appears.

5

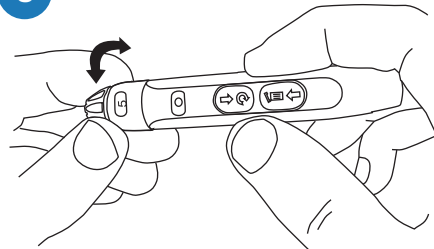

Adjust the cap to your desired puncture depth level.

4

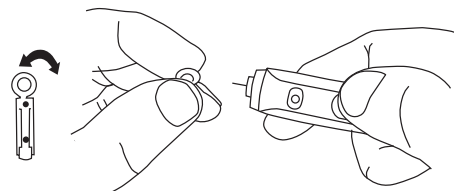


Insert a new lancet into the lancing device and twist off its plastic cap.

**IMPORTANT:**


The lancing device is intended for single patient use.

6

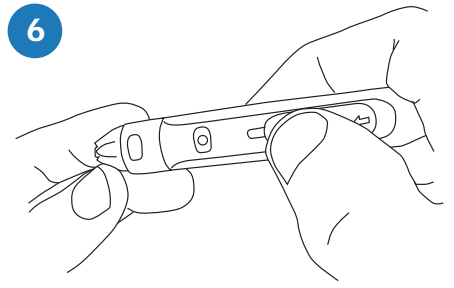

Using your thumb, push the sliding button back. You will hear a click, indicating that the lancet carrier is locked into position.

7

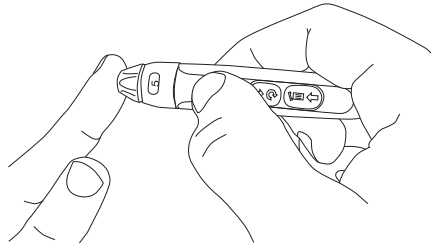

Position the end of the device against the side of the fingertip. Press the trigger button to actuate the lancet.

9



Your test result will display.

8



Make sure the **Apply Blood** screen is displayed. Touch the tip of the test strip to the blood drop until the end is filled.

10

Middle  
Down

(Please refer to User Manual page 9 for button location.)



Highlight a reading tag using the **down** button. Enter the reading tag by pressing the **middle** button.

11




Remove test strip to send data to MyTelcare.com.

IF NO DATA CONNECTION:

1. Move to different location to get a cell signal,
2. Go to **History**,
3. Highlight unsent reading,
4. Press middle side button to send.

(Images are for reference only.)  
ART – 048 Rev. 3

12

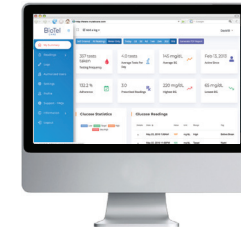

Log in to MyTelcare.com to:

- View blood glucose readings
- Invite caregivers
- Set up messaging options
- Create target zones
- Print data

See your Telcare BGM User Manual and Telsolve User Manual located at MyTelcare.com for full instructions.

Call 888-666-4530 (US) or  
(1) (978) 610-4688 (International)  
(9AM - 9PM EST, M-F)

with any questions or comments.  
For In Vitro Use Only

TEL CARE®

Telcare, LLC  
150 Baker Avenue Extension  
Suite 300  
Concord, MA 01742, USA