



**Instructions inside. Open to learn more.**

**Instrucciones adentro. Abra para aprender más.**

# Take your first test today!

If this is your first time using the device and it has not already been registered, register your device at <https://registration.mytelcare.com/>


## 1. Installing the Batteries




**If this is your first time using the device:**

1. Open the battery cover on the bottom of your scale.
2. Install the batteries provided with the device.  
Follow the diagram inside the battery compartment for correct polarity - the springs should align with the negative side on the batteries.
3. Replace the battery cover until closed and secure.

## 2. Taking a Measurement

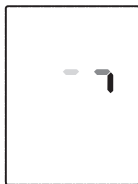

Transmission  
in progress

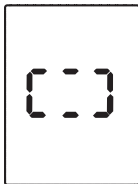

Transmission  
successful

1. Place the scale on a flat and hard surface.
2. Step on the scale and remain still until the measurement is complete.
3. The device automatically transmits the measurement results. During this process, an indicator is shown in the middle of the display.
4. When the measurement is successfully transmitted, the device shows the following indication before turning off.
5. Log into your portal to see your results today!

**This page intentionally left blank.**

**This page intentionally left blank.**

# ¡Hágase hoy mismo su primera prueba!

Si esta es la primera vez que usa el dispositivo y no lo ha registrado todavía, regístrelo en <https://registration.mytelcare.com/>


## 1. Instalación de las pilas




**Si esta es la primera vez que usa el dispositivo:**

1. Abra la tapa de las pilas en la parte inferior de la báscula.
2. Instale las pilas que se incluyen con el dispositivo. Siga el diagrama que aparece dentro del compartimento para pilas para colocarlas con la polaridad correcta. Los resortes se deben alinear con el lateral negativo de la pila.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas hasta que se cierre de forma segura.

## 2. Cómo hacer una medición

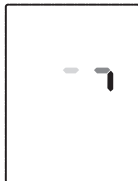

Transmission  
in progress

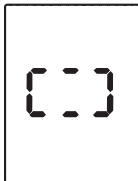

Transmission  
successful

1. Coloque la báscula en una superficie dura y plana.
2. Súbase a la báscula y quédese quieto hasta que termine la medición.
3. El dispositivo transmite automáticamente los resultados de la medición. Durante este proceso aparece un indicador en la mitad de la pantalla.
4. Cuando la medición se haya transmitido satisfactoriamente, el dispositivo muestra la siguiente indicación antes de apagarse.
5. ¡Inicie sesión en su portal para ver sus resultados hoy!

Telcare, LLC  
600 West Ridge Road, Suite 200  
Linwood, PA 19061, USA  
Phone: (888) 666-4530 (US) or  
(1) (978) 610-4688 (International)

The BioTel Care® Terms of Service (“Terms”) outline the terms regarding your use of our products and can be found at <http://Biotelcare.com/terms>. If you do not agree with these Terms, do not register or use any of the Services.

Telcare, LLC  
600 West Ridge Road, Suite 200  
Linwood, PA 19061, USA  
Teléfono: (888) 666-4530 (EE.UU.)  
o (1) (978) 610-4688 (internacional)

Los términos de servicio de BioTel Care® (“Términos”) describen los términos de uso de nuestros productos y se pueden encontrar en <http://Biotelcare.com/terms>. Si no acepta estos Términos, no se registre ni use ninguno de los servicios.