

The Philips logo is displayed in a white square with rounded corners and a blue shadow. The word "PHILIPS" is written in a bold, blue, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned below the square, with a curved end on the right side.

PHILIPS

Instructions included

Instructions




Take your first test today

Installing the batteries


If this is your first time using the device:

- 1 Slide open the battery door on the back of the device.
- 2 Install the batteries provided with the device. Follow the diagram inside the battery compartment. For correct polarity, the springs should align with the negative sign on the battery.
- 3 Slide the battery door closed.

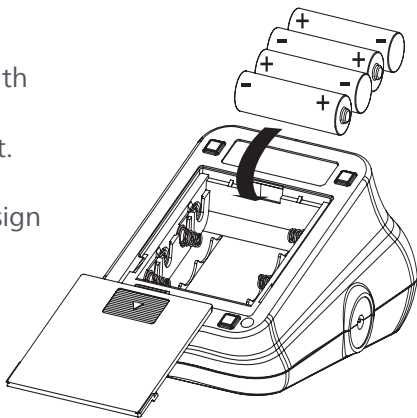


Securing the cuff

- 1 Plug the connector on the cuff tube into the device.

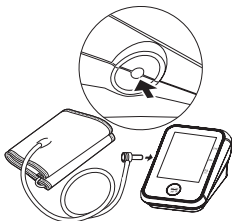

- 6 Position the cuff's edge about an inch (2-3 cm) above the elbow.

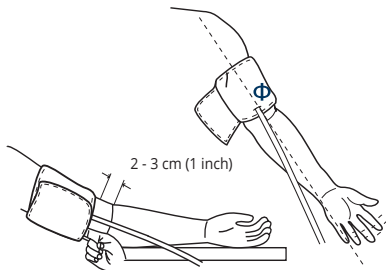

- 2 Expose your left upper arm by removing or adjusting clothing and jewelry. Make sure blood flow is not constricted by a rolled up sleeve.

- 7 Align the Φ marker (located to the right of the tube exit) with the center of your arm.

- 3 Open the cuff and loosen fully.

- 8 Tighten the cuff evenly around your arm by pulling on the end. Make sure the Φ marker stays aligned with the center of your arm.


- 4 Orient the cuff so that the tube exits towards your hand.

- 5 Place your arm through the cuff loop, with your palm facing up.


- 9 Wrap the end of the cuff over your arm to secure it in place. Don't make it too tight- allow a finger to fit between the cuff and your arm.

Taking a measurement


- 1 Lay your arm on a table with your palm facing up. The cuff should be at the same height as your heart. Sit up straight and rest your feet flat on the ground. Make sure the tube is not kinked or pinched.
- 2 Press the START/STOP button on the device to turn it on.
- 3 Wait for the device to power on, and perform the measurement while inflating the cuff.
- 4 When the measurement concludes, results are shown on the display and the cuff automatically deflates.
- 5 Remove the cuff after it deflates.
- 6 The device automatically transmits measurement results. During this process an indicator is shown in the middle of the display.
- 7 When the measurement is successfully transmitted, the device shows the following indication before powering off.
- 8 Log into your portal to see your results today.

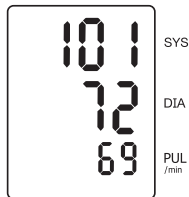

Measurements

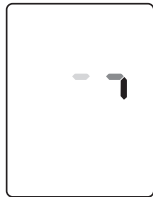

Transmission
in progress

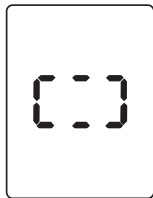

Transmission
successful

Distributed by:

Telcare, LLC

600 West Ridge Road Suite 200

Linwood, PA 19061

Phone:

(888) 666-4530 (US /EE.UU.)

(1) (978) 610-4688 (International)

Monday - Friday, 9AM - 9PM EST

Email:

VCM-customer@philips.com

www.philips.com/virtualcaremanagement

The Terms of Service (“Terms”) outline the terms regarding your use of our products and can be found at www.philips.com/virtualcaremanagement/terms. If you do not agree with these Terms, do not register or use any of the Services.

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Distribuido por:

Telcare, LLC

600 West Ridge Road Suite 200

Linwood, PA 19061

Teléfono:

(888) 666-4530 (US /EE.UU.)

(1) (978) 610-4688 (Internacional)

Lunes - viernes, 9AM - 9PM hora del este

Correo electrónico:

VCM-customercare@philips.com

www.philips.com/virtuallcarenagement

Los términos de servicio ("Términos") describen los términos de uso de nuestros productos y se pueden encontrar en www.philips.com/virtuallcarenagement/terms. Si no acepta estos Términos, no se registre ni use ninguno de los servicios. © 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Cómo hacer una medición

- 1 Ponga el brazo encima de una mesa con la palma de la mano mirando hacia arriba. El manguito debe estar a la misma altura que el corazón. Siéntese derecho y apoye los pies planos sobre el piso. Asegúrese de que el tubo no esté retorcido ni pellizcado.

- 2 Presione el botón START/STOP (INICIAR/DETENER) en el dispositivo para encenderlo.

- 3 Espere a que se encienda el dispositivo y realice la medición mientras infla el manguito.

- 4 Cuando termine la medición, los resultados aparecen en la pantalla y el manguito se desinfla automáticamente.

- 5 Retire el manguito una vez que se desinfla.

- 6 El dispositivo transmite automáticamente los resultados de las mediciones. Durante este proceso, aparece un indicador en la mitad de la pantalla.

- 7 Cuando la medición se haya transmitido satisfactoriamente, el dispositivo muestra la siguiente indicación antes de apagarse.

- 8 Inicie sesión en su portal para ver sus resultados hoy.



Cómo colocar el manguito

1 Conecte el conector del tubo del manguito al dispositivo.



2 Descubra la parte superior del

brazo izquierdo quitándose o

ajustándose la ropa y las joyas.

Asegúrese de que no está

restringiendo el flujo de sangre

cuando se remangue.

3 Abra el manguito y aflojelo

del todo.


4 Oriente el manguito de forma que

el tubo salga hacia la mano.

5 Meta el brazo por el lazo el manguito, con la palma de la mano hacia arriba.

6

Sitúe el borde del manguito aproximadamente una pulgada (2-3 cm) por encima del codo.

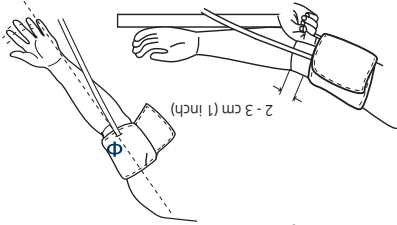

7

Alinee el marcador Φ (situado a la derecha de la salida del tubo) con el centro del brazo.

8

Apriete uniformemente el manguito alrededor del

brazo tirando del extremo y asegurándose de que el marcador Φ se mantiene alineado con el

centro del brazo.

9


Envuelva el extremo del manguito en el brazo para situarlo en posición. No lo apriete en exceso. Debe caber un dedo entre el manguito y el brazo.

Hágase hoy mismo su primera prueba

Instalación de las pilas

Si esta es la primera vez que usa el dispositivo:

- 1** Deslice la tapa de las pilas situada en la parte posterior del dispositivo para abrirla.
- 2** Instale las pilas que se incluyen con el dispositivo. Siga el diagrama que aparece dentro del compartimento de las pilas. Para colocarlas con la polaridad correcta, los resortes se deben alinear con el signo negativo de la pila.
- 3** Deslice la tapa de las pilas para cerrarla.

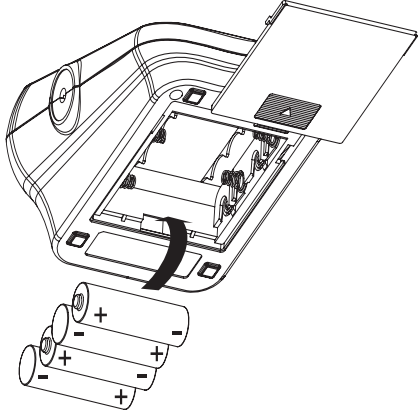



Instrucciones

Instrucciones

