

The Philips logo is located in the top left corner. It consists of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font. The text is contained within a white rectangular area that has a rounded bottom-right corner. A thick blue horizontal bar is positioned below the white area, extending from the left edge of the white box to the right edge of the rounded corner.

**PHILIPS**

**Instructions included**

# Take your first test today

## Installing the batteries


*If this is your first time using the device:*

- 1 Open the battery cover on the bottom of your scale.
- 2 During Install the batteries provided with the device. Follow the diagram inside the battery compartment. For correct polarity, the springs should align with the negative side on the batteries.
- 3 Replace the battery cover until closed and secure.




## Taking a measurement

- 1 Place the scale on a flat and hard surface.
- 2 Step on the scale and remain still until the measurement is complete.
- 3 The device automatically transmits the measurement results. During this process, an indicator is shown in the middle of the display.
- 4 When the measurement is successfully transmitted, the device shows the following indication before turning off.
- 5 Log into your portal to see your results today.

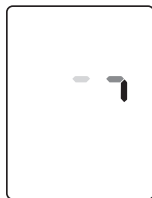

Transmission  
in progress

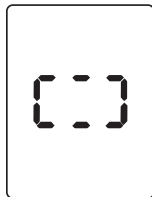

Transmission  
successful

## **Distributed by:**

Telcare, LLC

600 West Ridge Road Suite 200

Linwood, PA 19061

## **Phone:**

(888) 666-4530 (US /EE.UU.)

(1) (978) 610-4688 (International)

Monday - Friday, 9AM - 9PM EST

## **Email:**

VCM-customer@philips.com

[www.philips.com/virtualcaremanagement](http://www.philips.com/virtualcaremanagement)

The Terms of Service (“Terms”) outline the terms regarding your use of our products and can be found at [www.philips.com/virtualcaremanagement/terms](http://www.philips.com/virtualcaremanagement/terms). If you do not agree with these Terms, do not register or use any of the Services.

© 2024 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

The Philips logo is located in the top-left corner of the page. It consists of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font, positioned above a thick blue horizontal bar. The bar has a rounded bottom-right corner.

**PHILIPS**

# **Instrucciones**

# Hágase hoy mismo su pri

## Instalación de las pilas

*Si esta es la primera vez que usa el dispositivo:*


- 1 Abra la tapa de las pilas en la parte inferior de la báscula.
- 2 Instale las pilas que se incluyen con el dispositivo. Siga el diagrama que aparece dentro del compartimento para pilas. Para colocarlas con la polaridad correcta, los resortes se deben alinear con el lateral negativo de la pila.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de las pilas hasta que se cierre de forma segura.




# mera prueba

## Cómo hacer una medición

- 1 Coloque la báscula en una superficie dura y plana.
- 2 Súbase a la báscula y quédese quieto hasta que termine la medición.
- 3 El dispositivo transmite automáticamente los resultados de la medición. Durante este proceso aparece un indicador en la mitad de la pantalla.
- 4 Cuando la medición se haya transmitido satisfactoriamente, el dispositivo muestra la siguiente indicación antes de apagarse.
- 5 Inicie sesión en su portal para ver sus resultados hoy.

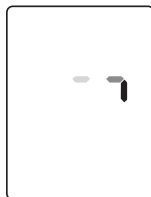

Transmisión  
en curso

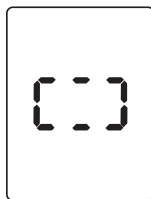

Transmisión  
satisfactoria

## **Distribuido por:**

Telcare, LLC

600 West Ridge Road Suite 200

Linwood, PA 19061

## **Teléfono:**

(888) 666-4530 (US /EE.UU.)

(1) (978) 610-4688 (International)

Monday - Friday, 9AM - 9PM EST

## **Correo electrónico:**

VCM-customer@philips.com

[www.philips.com/virtualcaremanagement](http://www.philips.com/virtualcaremanagement)

Los términos de servicio ("Términos") describen los términos de uso de nuestros productos y se pueden encontrar en [www.philips.com/virtualcaremanagement/terms](http://www.philips.com/virtualcaremanagement/terms). Si no acepta estos Términos, no se registre ni use ninguno de los servicios.

© 2024 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.